


Informatsioon diabeedi kohta ning üksikasjalikud aruanded käepärast, mida saate ka oma arstiga jagada

Kuidas rakendus *mySugr* kasutusele võtta?


- 1 Laadige App Store'ist või Google Playst alla [rakendus mySugr](#).
- 2 Looge endale *mySugr*'i konto.
- 3 Avage tasuta juurdepääs *mySugr Pro*'le, kust leiate põhjalikuma PDF-aruande funktsiooni ja enamgi veel:




Ühendage sellega mõõdik *Accu-Chek®* ja saate *Pro* versiooni piiramatult kasutada.

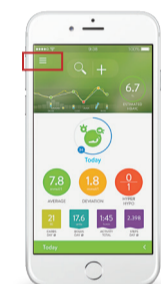


Avage rakenduse *mySugr* külmenüü

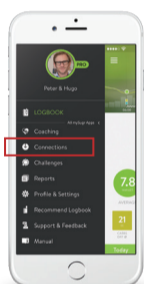

Leidke „Connections” (Ühendused)

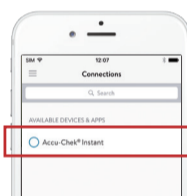

Valige „Accu-Chek Instant”

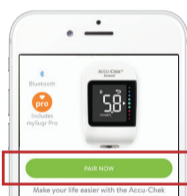

Puudutage valikut „Connect now” (Ühenda nüüd)



Koodi küsimisel sisestage glükomeetri tagaküljele märgitud PIN-kood




Kui teil ei ole mõõdikut *Accu-Chek®*, saate *Pro* versiooni 6 kuuks tasuta – selleks avage <http://shop.mysugr.com/en/voucher> ja sisestage kupongi kood 2020-2020-2020. (Kood kehtib 30. septembrini 2020. a)

- 4 Vere glükoosinäitajad saab automaatselt *Accu-Chek®* mõõdikust importida ja/või andmed käsitsi registreerida.


Pidage sidet – jagage *mySugr*'i aruandeid teid jälgiva spetsialistiga

Saate jagada PDF-aruandeid, kus on toodud 2 nädala või 3 kuu põhjalikud andmed teie diabeedi kohta. ([Vaadake juhendit siit.](#))

Aruande koostamine ja andmete jagamine

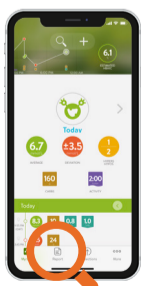


Valige menüüst „Aruanne” (Report)

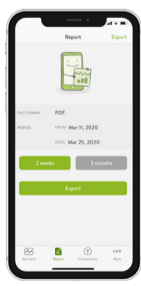

Valige soovitud periood ja seejärel käsk „Ekspordi” (Export)



Klõpsake jagamise piktogramm

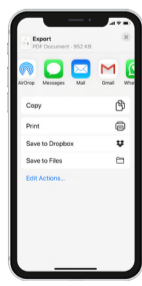

Valige rakendus, mille kaudu soovite aruannet jagada



Üle 2 miljoni registreeritud kasutaja.
Kasutajate keskmine hinne: 4,6.

Helistage kohaliku klienditeenindusse telefonil 3726460660.